

## **S.O.T** Orthèse de pouce

Positionnez le pouce dans une position de repos optimale



COMPENSER LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DANS LES TROUBLES NEUROLOGIQUES

# S.O.T Orthèse de pouce

## Utilisation prévue: limitation des mouvements dans l'articulation CMC-1

### Limitation fonctionnelle selon ICF

Mobilité articulaire   Stabilité articulaire   **Force musculaire**   Tonus musculaire   **Mode de déplacement lors de la marche**

Le support de pouce S.O.T est un tout nouveau support de pouce de forme anatomique avec support de voûte plantaire. L'orthèse est conçue pour limiter les mouvements de l'articulation CMC afin d'éviter l'étirement excessif des ligaments, qui peut conduire à la subluxation de l'articulation.

### Propriétés

- Le matériau s'adapte parfaitement, faisant de l'orthèse une alternative idéale à une orthèse sur mesure
- Le renfort en aluminium palmaire intégré s'adapte facilement à l'ajustement désiré.
- Matériau: polyester, polyéthylène, aluminium, nylon, TPU et Spandex

### Fonctions du produit

- Orthèse de repos pour le pouce, conçue pour prévenir les mouvements dans l'articulation CMC-1
- Positionnement du pouce dans une position fonctionnelle tout en maintenant la fonction de préhension
- Supportive (peut également être utilisée avec une orthèse de poignet textile pour un soutien supplémentaire)

### Indications

- Rhizarthrose\* (CIM10: M18,9)
- Polyarthrite rhumatoïde (CIM10: M06.9)
- Contracture d'adduction (pouces) (CIM10: M62.4)
- Distorsion du CMC (CIM10: S63.7)

### Avantages pour l'atteinte des objectifs visés


- Réduction de la douleur
- Stabilisation de l'articulation CMC-1
- Maintenir la fonction de préhension fonctionnelle

\*EA au stade 1-3 du CMC-1, selon la classification Eaton et Littler.  
Au stade 4 de l'arthrose, l'os scaphoïde est atteint et l'appui-pouce doit être combiné avec une orthèse du poignet.

### Tableau des dimensions de la S.O.T Orthèse de pouce

No d'art droit	No d'art gauche	Taille	Largeur MCP (taille 1)	Longueur du poignet à l'extrémité du majeur (taille 2)
28720R-S	28720L-S	small	≤ 75 mm	≤ 185 mm
28720R-M	28720L-M	medium	≤ 85 mm	≤ 200 mm
28720R-L	28720L-L	large	≤ 90 mm	≤ 210 mm

### Mesurer:

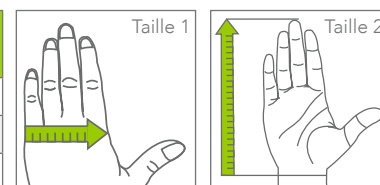

La relation entre la largeur du MCP et la longueur du poignet et du bout des doigts peut varier. Utilisez ce tableau de dimensions à titre indicatif seulement.

**Basko Healthcare**

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tél.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: [vente@basko.com](mailto:vente@basko.com) | Internet: [www.basko.com](http://www.basko.com)

[basko.com](http://basko.com)