

# MILINE Opties & Accessoires

## Voetbeugel opties

- Compatibel met alle MILINE enkelscharnieren
- Nauwkeurig aflezen van R.O.M.
- Heavy duty voetbeugels beschikbaar

### Maattabel Y-voetbeugels (voor DA & DF-scharnieren)

| Art. nr.  | Eenheid | Beschrijving                               |
|-----------|---------|--|
| MI-YS13   | stuk    | Y-voetbeugel voor 13 mm systeem            |
| MI-YS16   | stuk    | Y-voetbeugel voor 16 mm systeem            |
| MI-YSHD16 | stuk    | Heavy Duty Y-voetbeugel voor 16 mm systeem |
| MI-YS20   | stuk    | Y-voetbeugel voor 20 mm systeem            |

### Maattabel Y-voetbeugels (voor SA-scharnieren)

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving   |
|------------|---------|--|
| MI-SYS13   | stuk    | Standard Action Y-voetbeugel voor 13 mm systeem            |
| MI-SYS16   | stuk    | Standard Action Y-voetbeugel voor 16 mm systeem            |
| MI-SYSHD16 | stuk    | Standard Action Heavy Duty Y-voetbeugel voor 16 mm systeem |
| MI-SYS20   | stuk    | Standard Action Y-voetbeugel voor 20 mm systeem            |


### Maattabel Rechte-voetbeugels (voor DA & DF-scharnieren)

| Art. nr.  | Eenheid | Beschrijving                                    |
|-----------|---------|---|
| MI-RS13   | stuk    | Rechte voetbeugel voor 13 mm systeem            |
| MI-RS16   | stuk    | Rechte voetbeugel voor 16 mm systeem            |
| MI-RSHD16 | stuk    | Heavy Duty rechte voetbeugel voor 16 mm systeem |
| MI-RS20   | stuk    | Rechte voetbeugel voor 20 mm systeem            |

### Maattabel Rechte-voetbeugels (voor SA-scharnieren)

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving   |
|------------|---------|--|
| MI-SRS13   | stuk    | Standard Action rechte voetbeugel voor 13 mm systeem         |
| MI-SRS16   | stuk    | Standard Action rechte voetbeugel voor 16 mm systeem         |
| MI-SRSHD16 | stuk    | Standard Action Heavy Duty rechte voetbeugel voor 16 mm sys. |
| MI-SRS20   | stuk    | Standard Action rechte voetbeugel   voor 20 mm systeem       |

**Opmerking:** gebruik MILINE Standard Action voetbeugels voor extra bewegingscontrole met MILINE Standard Action enkelscharnieren. De bovenzijdes van de voetbeugels zijn lasergeëtst in stappen van 5° voor eenvoudige R.O.M. aanpassing.

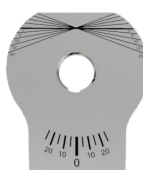

Standard Action voetbeugel

## Ingietanker opties

- Gemaakt van hoogwaardig roestvast staal

### Maattabel ingietankers

| Art. nr. | Eenheid | Beschrijving                            |
|----------|---------|---|
| MI-LU13  | stuk    | Lamineer ingietanker voor 13 mm systeem |
| MI-LU16  | stuk    | Lamineer ingietanker voor 16 mm systeem |
| MI-LU20  | stuk    | Lamineer ingietanker voor 20 mm systeem |



## Accessoires

De fabricage gereedschapset kan worden gebruikt voor zowel unilaterale als bilaterale ortheseontwerpen.



### Maattabel fabricage gereedschapset

| Art. nr. | Eenheid | Beschrijving                               |
|----------|---------|--|
| MI-FTK   | stuk    | Geschikt voor alle MILINE enkelscharnieren |

# MILINE

## Enkelscharnieren



**Basko Healthcare**

Pieter Lief tinckweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | E-mail: verkoop@basko.com

basko.com

8804420-NL / Stand: 06/2023

**Basko**  
Healthcare

# MILINE Enkelscharnieren

## Double Action

- R.O.M.-veren en bewegingsbegrenzers inbegrepen
- Verkrijgbaar met additionele dorsale of ventrale Booster voor dorsi- of plantairflexie weerstand/ondersteuning
- Zowel unilateraal als bilateraal inzetbaar
- Met optionele Booster zijn verschillende veerconfiguraties mogelijk
- Systematische afstelprocedure voor MILINE Double Action



### Maattabel Double Action zonder Booster

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving                                | Been | Zijde      |
|------------|---------|---|------|------------|
| MI-213-A0U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier   13 mm |      |            |
| MI-216-A0U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier   16 mm |      | Universeel |
| MI-220-A0U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier   20 mm |      |            |




### Maattabel Double Action met Booster

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving   | Been   | Zijde    |
|------------|---------|--|--------|----------|
| MI-213-A1U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met dorsale Booster   13 mm  | rechts | lateraal |
| MI-213-A2U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met ventrale Booster   13 mm | links  | lateraal |
| MI-216-A1U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met dorsale Booster   16 mm  | rechts | lateraal |
| MI-216-A2U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met ventrale Booster   16 mm | links  | lateraal |
| MI-220-A1U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met dorsale Booster   20 mm  | rechts | lateraal |
| MI-220-A2U | stuk    | MILINE Double Action enkelscharnier met ventrale Booster   20 mm | links  | lateraal |

## Standard Action


- Uitwisselbaar met alle MILINE voetbeugels voor een vrije beweging
- MILINE Standard Action voetbeugels zijn lasergeëtst in stappen van 5° voor eenvoudige aanpassing van de bewegingshoek

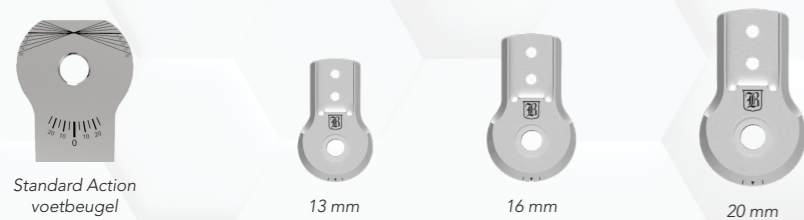

### Maattabel Standard Action

| Art. nr.  | Eenheid | Beschrijving                                  | Been | Zijde      |
|-----------|---------|---|------|------------|
| MI-013A0U | stuk    | MILINE Standard Action enkelscharnier   13 mm |      |            |
| MI-016A0U | stuk    | MILINE Standard Action enkelscharnier   16 mm |      | Universeel |
| MI-020A0U | stuk    | MILINE Standard Action enkelscharnier   20 mm |      |            |

Meerdere veeropties voor individuele afstelling naar gelang de behoefte van de patiënt

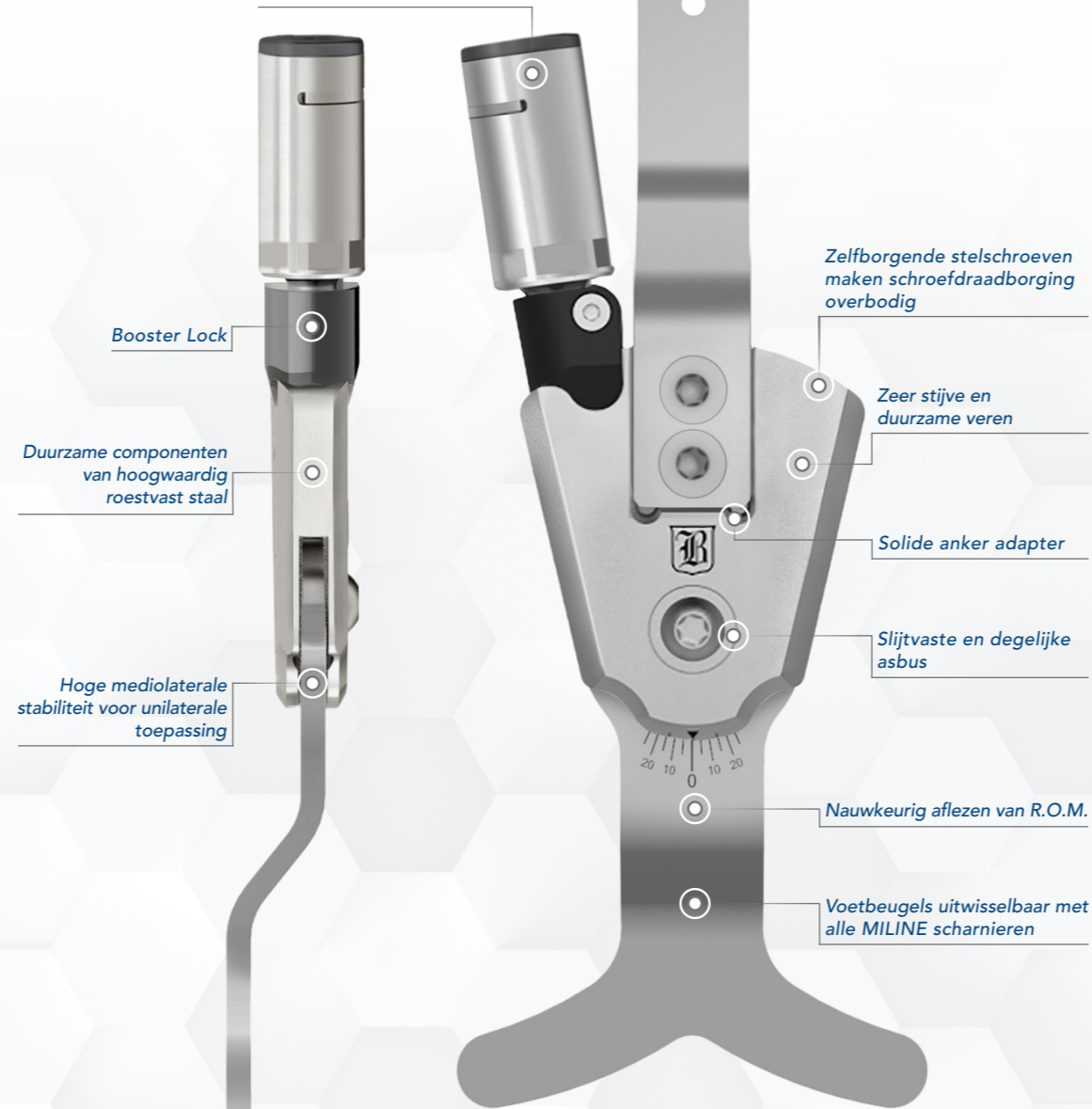

Booster Lock

Duurzame componenten van hoogwaardig roestvast staal

Hoge mediolaterale stabiliteit voor unilaterale toepassing

Zelfborgende stelschroeven maken schroefdraadborging overbodig

Zeer stijve en duurzame veren

Solide anker adapter

Slijtvaste en degelijke asbus

Nauwkeurig aflezen van R.O.M.

Voetbeugels uitwisselbaar met alle MILINE scharnieren

Afgebeeld model MI-216-A1U

## Dorsiflexion Assist

- Standaard geleverd met R.O.M.-veer en bewegingsbegrenzer
- Verkrijgbaar met optionele dorsale Booster voor plantairflexie weerstand
- Zowel unilateraal als bilateraal inzetbaar



### Maattabel Dorsiflexion Assist zonder Booster

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving  | Been   | Zijde    |
|------------|---------|---|--------|----------|
| MI-113-A0R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   13 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-113-A0L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   13 mm - links  | links  | lateraal |
| MI-116-A0R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   16 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-116-A0L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   16 mm - links  | links  | lateraal |
| MI-120-A0R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   20 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-120-A0L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   20 mm - links  | links  | lateraal |

### Maattabel Dorsiflexion Assist met dorsale Booster

| Art. nr.   | Eenheid | Beschrijving  | Been   | Zijde    |
|------------|---------|---|--------|----------|
| MI-113-A1R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   13 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-113-A1L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   13 mm - links  | links  | lateraal |
| MI-116-A1R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   16 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-116-A1L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   16 mm - links  | links  | lateraal |
| MI-120-A1R | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   20 mm - rechts | rechts | lateraal |
| MI-120-A1L | stuk    | MILINE Dorsiflexion enkelscharnier   20 mm - links  | links  | lateraal |

## Gewichtslimieten

| Systeemmaat    | Unilateraal | Bilateraal |
|----------------|-------------|------------|
| 13 mm systemen | 50 kg       | 80 kg      |
| 16 mm systemen | 85 kg       | 120 kg     |
| 20 mm systemen | 110 kg      | 160 kg     |

## Veerconfiguraties

MILINE Double Action & Dorsiflexion Assist scharnieren met en zonder Booster



| MILINE systeemmaat | Kenmerken veer  | Zonder Booster   | Met Booster      |           |                |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
|                    |                 |                  | B1               | B2        | B3             |
| 13 mm              | Stijfheid:      | laag             | gemiddeld        | hoog      | -              |
|                    | Actieve R.O.M.: | 15°              | 25°              | 12°       | -              |
| 16 mm              | Stijfheid:      | gemiddeld        | gemiddeld        | hoog      | zeer hoog      |
|                    | Actieve R.O.M.: | 20°              | 20°              | 10°       | 10° / 20°      |
| 20 mm              | Stijfheid:      | gemiddeld / hoog | gemiddeld / hoog | zeer hoog | max. stijfheid |
|                    | Actieve R.O.M.: | 15°              | 15°              | 10°       | 10° / 15°      |