

Klompvoetverzorging voor kinderen



P.E.A.care 2.0 spalk en
Clubycare schoenen

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com

P.E.A.care 2.0 Static Quick Release

Voor de behandeling van baby's en peuters met klompvoetjes die o.a. volgens de Dr. Ponseti methode worden behandeld. Een complete orthese bestaat uit de combinatie van de P.E.A.care spalk waar op de uiteinden de Clubycare schoentjes zijn gemonteerd.




Kenmerken

- Schoentjes snel en eenvoudig te monteren/demonteren middels snelkoppeling
- Instelbare spalklengte
- Instelbare rotatiehoek (0° tot 80°)
- Instelbare dorsaalflexie (0° tot 20°)
- Combineerbaar met Clubycare schoenen
- Gewicht: 210 - 220 gram
- Materiaal: hoogwaardig XF kunststof

Maattabel - Static Quick Release

Artikelnummer "Static Quick Release"	Maat	Spalkbreedte	Schouderbreedte
2850-1	1	195 - 275 mm	240 - 320 mm
2850-2	2	230 - 345 mm	280 - 390 mm

Maatbepaling: de juiste maat wordt bepaald aan de hand van de schouderbreedte.

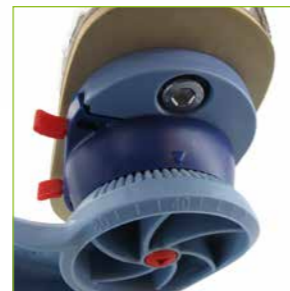

Indicaties

- Arthrogryposis multiplex congenita (ICD10: Q74.3)
- Pes equinovarus congenitus (ICD10: Q66.0)

Clubycare Schoenen

Voor de behandeling van de pediatrie klompvoetbehandeling volgend de Ponsetti methode. De Clubycare schoen is van een zacht leer gemaakt en biedt een hoog draagcomfort. De schoen wordt door middel van schroeven eenvoudig aan de voetplaten van P.E.A.care spalk bevestigd. De schroeven worden met de spalk meegeleverd. De Clubycare is naar keuze leverbaar met een veter- of klittenbandsluiting.

Kenmerken

- Leverbaar met veter- of klittenbandsluiting
- Hielversterking en voering
- Open hiel
- Open teen
- Levering: **per stuk**
- Langer hielriempje (ingestikt en versterkt, niet rekbaar)
- Combineerbaar met P.E.A.care spalken
- Materiaal: zacht nappa leder; zool: rubber; veter: katoen; voering: EVA-kunststof

Indicaties

- Arthrogryposis multiplex congenita (ICD10: Q74.3)
- Pes equinovarus congenitus (ICD10: Q66.0)



Maattabel - Clubycare schoenen

Art. nr. zonder abductie links met veters	Art. nr. zonder abductie rechts met veters	Art. nr. zonder abductie links met klitteband	Art. nr. zonder abductie rechts met klitteband	Art. nr. met abductie links met veters	Art. nr. met abductie rechts met veters	Maat	Schoenlengte	Voetbreedte
BA905L-12	BA905R-12	BA908L-12	BA908R-12	-	-	12	72 mm	40 mm
BA905L-13	BA905R-13	BA908L-13	BA908R-13	-	-	13	79 mm	42 mm
BA905L-14	BA905R-14	BA908L-14	BA908R-14	BA705L-14	BA705R-14	14	85 mm	43 mm
BA905L-15	BA905R-15	BA908L-15	BA908R-15	BA705L-15	BA705R-15	15	92 mm	45 mm
BA905L-16	BA905R-16	BA908L-16	BA908R-16	BA705L-16	BA705R-16	16	98 mm	46 mm
BA905L-17	BA905R-17	BA908L-17	BA908R-17	BA705L-17	BA705R-17	17	107 mm	47 mm
BA905L-18	BA905R-18	BA908L-18	BA908R-18	BA705L-18	BA705R-18	18	113 mm	48 mm
BA905L-19	BA905R-19	BA908L-19	BA908R-19	BA705L-19	BA705R-19	19	120 mm	50 mm
BA905L-20	BA905R-20	BA908L-20	BA908R-20	BA705L-20	BA705R-20	20	126 mm	51 mm
BA905L-21	BA905R-21	BA908L-21	BA908R-21	BA705L-21	BA705R-21	21	133 mm	52 mm
BA905L-22	BA905R-22	BA908L-22	BA908R-22	BA705L-22	BA705R-22	22	139 mm	54 mm
BA905L-23	BA905R-23	BA908L-23	BA908R-23	BA705L-23	BA705R-23	23	146 mm	55 mm
BA905L-24	BA905R-24	BA908L-24	BA908R-24	BA705L-24	BA705R-24	24	152 mm	56 mm
BA905L-25	BA905R-25	BA908L-25	BA908R-25	BA705L-25	BA705R-25	25	159 mm	58 mm
BA905L-26	BA905R-26	BA908L-26	BA908R-26	BA705L-26	BA705R-26	26	166 mm	59 mm
BA905L-27	BA905R-27	BA908L-27	BA908R-27	BA705L-27	BA705R-27	27	172 mm	60 mm
BA905L-28	BA905R-28	BA908L-28	BA908R-28	BA705L-28	BA705R-28	28	179 mm	62 mm
BA905L-29	BA905R-29	BA908L-29	BA908R-29	BA705L-29	BA705R-29	29	185 mm	63 mm
BA905L-30	BA905R-30	BA908L-30	BA908R-30	-	-	30	192 mm	64 mm

Levering is uitsluitend per stuk. Een essentiële functie van de Clubycare schoen is het hielriempje, dat ervoor zorgt dat de hiel correct tegen de contrefort van de schoen geplaatst is. Daarom dient er rekening gehouden te worden met voldoende groeireserve (max. 15 mm).